

# color

## Kit de Recolha de Teste COVID-19 Não Monitorizado

Instruções no local

### Antes de começar:

- A sua amostra deve ser deixada no ponto de recolha designado do seu teste no mesmo dia em que a recolher.
- Certifique-se de que há uma recolha hoje. Verifique com o coletor do seu teste COVID-19 quais as amostras que serão aceites hoje.
- Não perca a última recolha. Verifique com o coletor do seu teste COVID-19 a hora da última recolha.

### O seu kit inclui:



Swab



Collection tube



Barcode card



Biohazard bag

1

Ative o seu kit *online* em [color.com/covid/activate](https://color.com/covid/activate).

Precisa do seu código de barras único, que encontrará no seu tubo de recolha.




**!** **Aviso: A sua amostra não será testada se o kit não estiver ativado.**

2

Antes de recolher a sua amostra, lave as suas mãos cuidadosamente durante 20 segundos e seque-as bem.

Este kit de recolha caseiro só é autorizado pela duração da declaração de que há circunstâncias que a autorização do uso de emergência de diagnósticos in vitro para a deteção e/ou diagnóstico da COVID-19 da Secção 564(b)(1) da Lei, 21 U.S.C. § 360bbb-3(b)(1), a menos que a autorização seja cessada ou revogada.


3

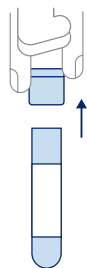

### Retire a tampa do tubo de recolha.

Mantenha a tampa perto.

4

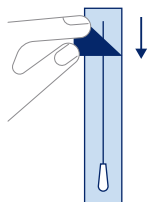


### Abra a embalagem do esfregaço.

A começar pela ponta do puxador da embalagem do esfregaço, retire o suporte de papel. Puxe o esfregaço da sua embalagem pelo puxador.

**Nota:** Não toque na ponta macia com as suas mãos nem a deite sobre nenhuma superfície.

5

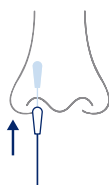


### Gire a ponta do esfregaço na primeira narina, 3 vezes.

Insira-o numa narina até que a ponta macia deixe de ser visível, cerca de 2,5 cm. Gire-o circularmente dentro da borda interna da sua narina pelo menos 3 vezes.

**Nota:** Não force mais o esfregaço.

6

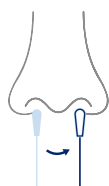

### Gire a ponta do esfregaço na outra narina, 3 vezes.

Repita o passo anterior na segunda narina, usando a mesma extremidade do esfregaço.

**Nota:** Deverá usar o mesmo esfregaço para as duas narinas.


7



### Ponha o esfregaço do tubo de recolha.

A ponta macia que entrou no seu nariz deverá entrar primeiro no tubo.

8

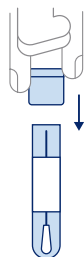

### Empurre para fechar a tampa do tubo de recolha.

Está quase pronto! Assegure-se de que a parte superior está firmemente fechada.

**Nota:** Depois de fechar o tubo de recolha, lave as suas mãos cuidadosamente durante 20 segundos e seque-as bem.

9



### Ponha o tubo de recolha no saco de perigo biológico.

Sele o saco fechado.

10



### Leve o saco de perigo biológico para o ponto de recolha designado do seu teste.

O coletor do seu teste COVID-19 mostrar-lhe-á onde depositar a sua amostra.

**Nota:** Se perder a hora da última recolha de hoje, peça ao coletor do seu teste COVID-19 um novo kit.

## Lista de verificação antes de devolver o seu *kit*:

- Ativou o seu *kit*?
- Recolheu uma amostra de ambas as narinas?

Visite [color.com/sample-return](https://color.com/sample-return) para saber mais.

### Perguntas?

Visite [support.color.com](https://support.color.com) ou contacte- nos em [support@color.com](mailto:support@color.com) ou (844) 352-6567.

## Antes de começar:

- A sua amostra deve ser deixada no ponto de recolha designado do seu teste no mesmo dia em que a recolher.
- Certifique-se de que há uma recolha hoje. Verifique com o coletor do seu teste COVID-19 quais as amostras que serão aceites hoje.
- Não perca a última recolha. Verifique com o coletor do seu teste COVID-19 a hora da última recolha.

## O seu kit inclui:



Swab



Collection tube



Barcode card

Biohazard  
bag**1**

Ative o seu kit *online* em [color.com/covid/activate](https://color.com/covid/activate).

Precisa do seu código de barras único, que encontrará no seu tubo de recolha.



**!** Aviso: A sua amostra não será testada se o kit não estiver ativado.


**2**

Antes de recolher a sua amostra, lave as suas mãos cuidadosamente durante 20 segundos e seque-as bem.

**3**

Retire a tampa do tubo de recolha.


Mantenha a tampa perto.

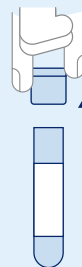
**4**

Abra a embalagem do esfregaço.

A começar pela ponta do puxador da embalagem do esfregaço, retire o suporte de papel. Puxe o esfregaço da sua embalagem pelo puxador.

**Nota:** Não toque na ponta macia com as suas mãos nem a deite sobre nenhuma superfície.

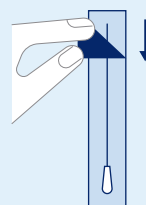

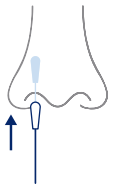

5

### Gire a ponta do esfregado na primeira narina, 3 vezes.

Insira-o numa narina até que a ponta macia deixe de ser visível, cerca de 2,5 cm. Gire-o circularmente dentro da borda interna da sua narina pelo menos 3 vezes.

**Nota:** Não force mais o esfregado.



6

### Gire a ponta do esfregado na outra narina, 3 vezes.

Repita o passo anterior na segunda narina, usando a mesma extremidade do esfregado.

**Nota:** Deverá usar o mesmo esfregado para as duas narinas.

7

### Ponha o esfregado do tubo de recolha.

A ponta macia que entrou no seu nariz deverá entrar primeiro no tubo.




8

### Empurre para fechar a tampa do tubo de recolha.

Está quase pronto! Assegure-se de que a parte superior está firmemente fechada.

**Nota:** Depois de fechar o tubo de recolha, lave as suas mãos cuidadosamente durante 20 segundos e seque-as bem.

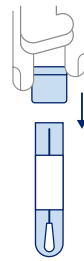

9

### Ponha o tubo de recolha no saco de perigo biológico.

Sele o saco fechado.



10

### Leve o saco de perigo biológico para o ponto de recolha designado do seu teste.

O coletor do seu teste COVID-19 mostrar-lhe-á onde depositar a sua amostra.

**Nota:** Se perder a hora da última recolha de hoje, peça ao coletor do seu teste COVID-19 um novo kit.



## Lista de verificação antes de devolver o seu *kit*:

- Ativou o seu *kit*?
- Recolheu uma amostra de ambas as narinas?

Visite [color.com/sample-return](https://color.com/sample-return) para saber mais.

### Perguntas?

Visite [support.color.com](https://support.color.com) ou contacte-nos em [support@color.com](mailto:support@color.com) ou (844) 352-6567.

Só Para Uso em Risco, Só Para Uso em Emergência. Este kit de recolha caseiro não foi aprovado e reconhecido pela FDA. Este kit de recolha caseiro foi autorizado pela FDA nos EUA.

Este kit de recolha caseiro foi autorizado só para recolha caseira e manutenção de espécimes nasais como ajuda à deteção do ácido nucleico do SARS-CoV-2 e não para quaisquer outros vírus ou agentes patogénicos.